

# Protocolo BUSTUP

Para o tratamento de **flacidez no colo pós-parto**

Além da flacidez na região abdominal, a flacidez de colo pode aparecer ou acentuar no período pós-amamentação. O rejuvenescimento da região é pouco conhecido, mas é muito eficaz para a retração do tecido e, conseqüentemente, levantar os seios da mulher - uma opção totalmente sem cirurgia.

O Ultraformer III realiza a retração do tecido na vetorização, diminuindo a sua flacidez, e o BB Laser Lavieen otimiza a produção de colágeno na região. Com essa associação de tecnologias, o colo é valorizado e rejuvenescido.



## ULTRAFORMER

Realizar os disparos em vetorização (sentido da seta).

### Vermelho:

Ponteira:

**4.5**

Disparos: 50 em cada vetor

Energia: 0.9

Pitch: 1.5

### Vermelho:

Ponteira:

**3.0**

Disparos: 50 em cada vetor

Energia: 0.7

Pitch: 1.5

### Azul:

Ponteira:


**2.0mm**

Disparos: 100

Energia: 0.4

Pitch: 1.3

\*Isolar tecido mamário

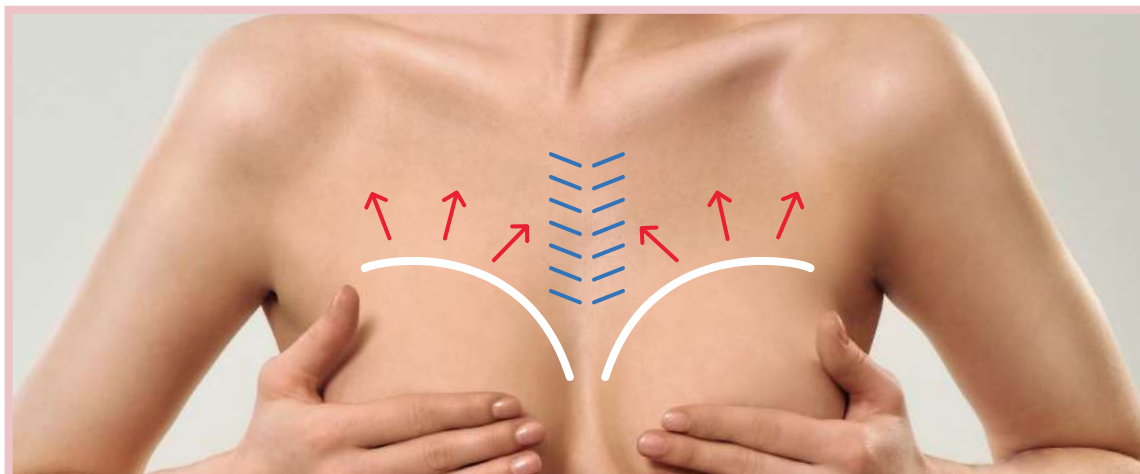

## LAVIEEN

Realizar no pós imediato - protocolo rejuvenescimento intenso.

Pode-se administrar mesclas para Drug delivery no pós-imediato para potencializar os resultados.

- 3 Sessões de Ultraformer
- 3 Sessões de Lavieen