

Protocolo ERASEN' UP PLUS

Para potencialização protocolo para
estrias pós-parto


Outra mudança que preocupa as mulheres são as estrias que podem aparecer na região do abdômen e no seio durante e após a gravidez. Elas são causadas pelo estiramento da pele e o ganho de peso muito rápido, ocorrendo a ruptura das ligações cruzadas das fibras de colágeno e elastina.

A radiofrequência microagulhada provoca o estímulo da regeneração celular através de microtraumas, com consequente proliferação de células-tronco, ne elastogênese e neocolagênese, além também da angiogênese local.

O laser fracionado não ablativo também tem sido utilizado para potencializar os resultados e condicionar respostas mais otimizadas no tratamento de estrias, na condição de estímulo da neocolagênese e melhorar o aspecto da pele localmente.

3 SESSÕES DE INTENSIF ASSOCIADA AO LAVIEEN

*Realize
drug delivery
na sessão
com Intensif

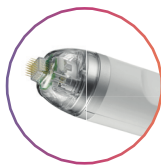

Intensif

2.5 a 3.0mm de agulha/ 140msec de pulso/ 14 a 16W de potência.



Lavieen

700us/7W / 0.8 distância – realizar os disparos sob a estria e ao redor.

Realize drug delivery na sessão com Intensif e Lavieen – estudos demonstram melhora substancial com associação a fatores de crescimento autólogos e microagulhamento (ABDEL- MOTALEB et al., 2020).